


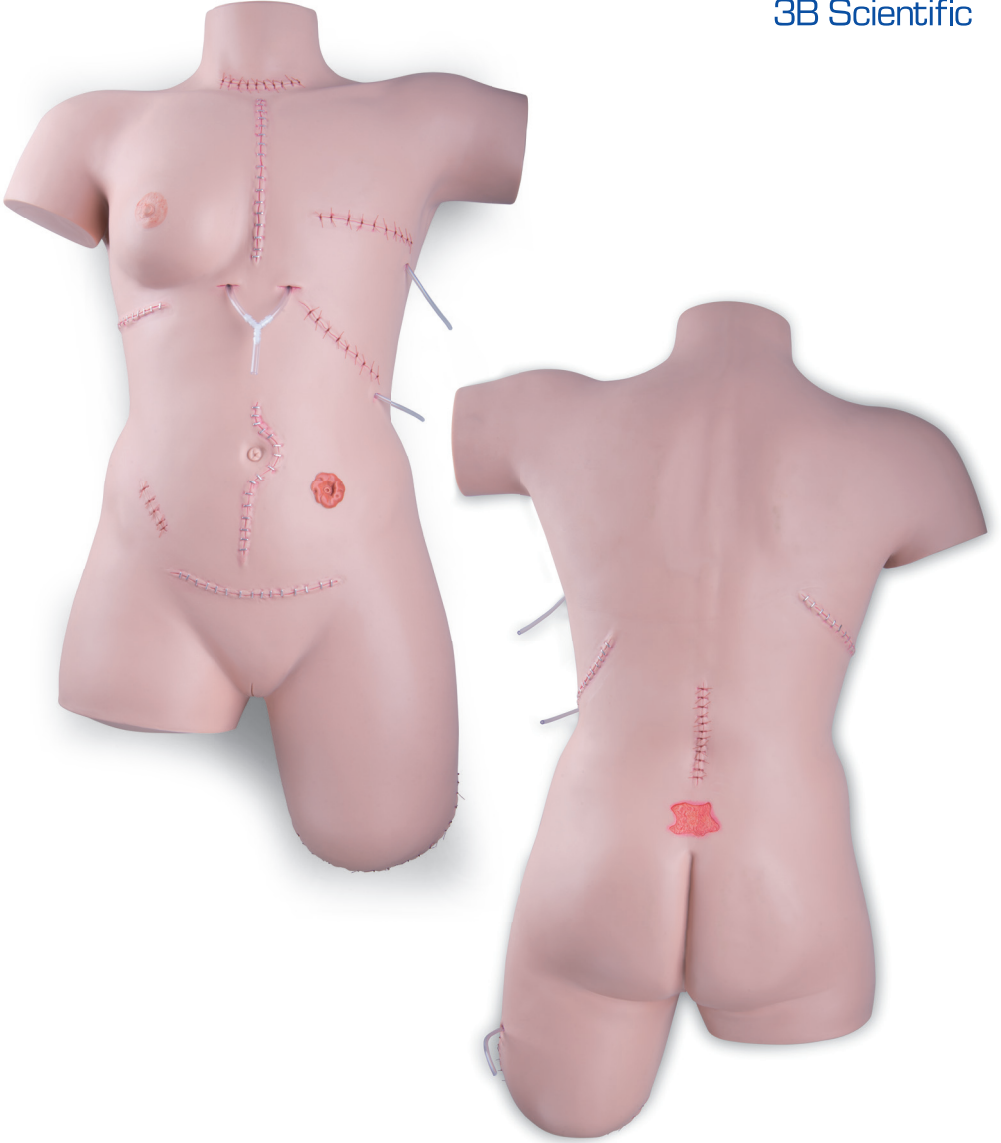

1020592 | P100

3bscientific.com

Yara bakımı ve bandaj teknikleri için simül t r

YARA BAKIMI VE BANDAJ TEKNİKLERİ İÇİN SİMÜLATÖR



Giriş

Yara bakımı ve bandaj tekniği için usulüne uygun yara bakımı ve bandaj tekniklerini gösterebileceğiniz ve alıştırma yapabileceğiniz simülatör satın aldınız. Simülatörde uygun şekilde ele alınabilecek ve bakım yapılabilecek 13 yara yeri vardır. Bununla hasta bakıcılığı eğitiminde ve günlük klinik uygulamalarında usulüne uygun yara yönetimi kapsamındaki standartlar (ör. hijyen) hususunda alıştırma yapılabilir ve böylelikle bunlar iyileştirilebilir.


Teslimat kapsamı

13 yara yerine sahip gövde

Taşıma çantası

Fonksiyonlar

Yara bakımı ve bandaj teknikleri için simülatör aşağıdaki cerrahi müdahaleleri ve fiziki tahribatları gösterir:

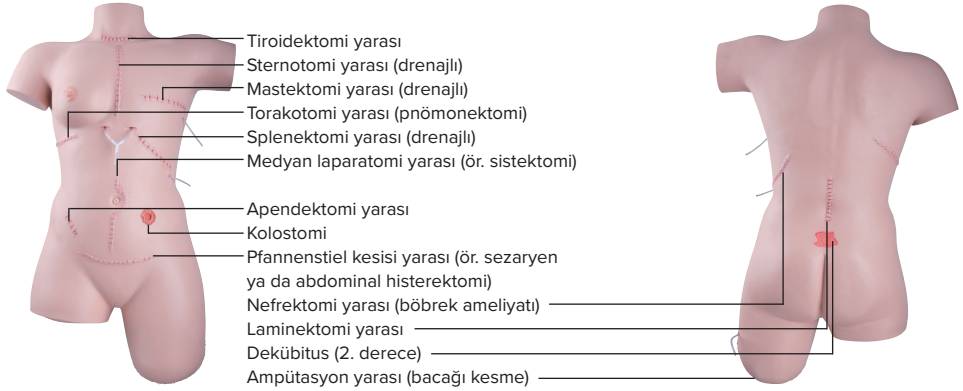

Gösterilen yaralar ve drenaj sistemleri usulüne uygun değerlendirilebilir ve uygun şekilde bakım yapılabilir. Yara bakımı piyasada bulunan malzemelerle yapılabilir ve böylelikle gerçeğe yakın alıştırma yapılabilir. Kullanılan malzemenin esnek yapısı sayesinde yara bantlarının takılması ve değiştirilmesi hususunda gerçeğe uygun koşullarda alıştırma yapılabilir.

Temizlik ve kullanıcı bakımı

Simülatörün yüzeyleri nemli bir bezle temizlenebilir. Yara bantlarının olası kalıntıları mutad yara bandı çıkarıcı ile çıkarılabilir. Lütfen mankenin parçalarını depolamadan önce tamamen kurutmaya dikkat edin.

Teknik veriler

Ölçüler:

Simülatör (YxGxD): 23 x 46 x 77 cm

Ağırlık: Yakl. 4,3 kg

İşletim koşulları:

İşletim sıcaklığı: -10°C ila +40°C

Depolama sıcaklığı: -20°C ila +40°C



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH • Customer Service Medical
Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com

© Copyright 2016 for instruction manual and design of
product: 3B Scientific GmbH, Germany